



独特的修复连接

B&B种植体3P EV WIDE统一内径为3mm，所以其上部修复部件规格也是统一的。

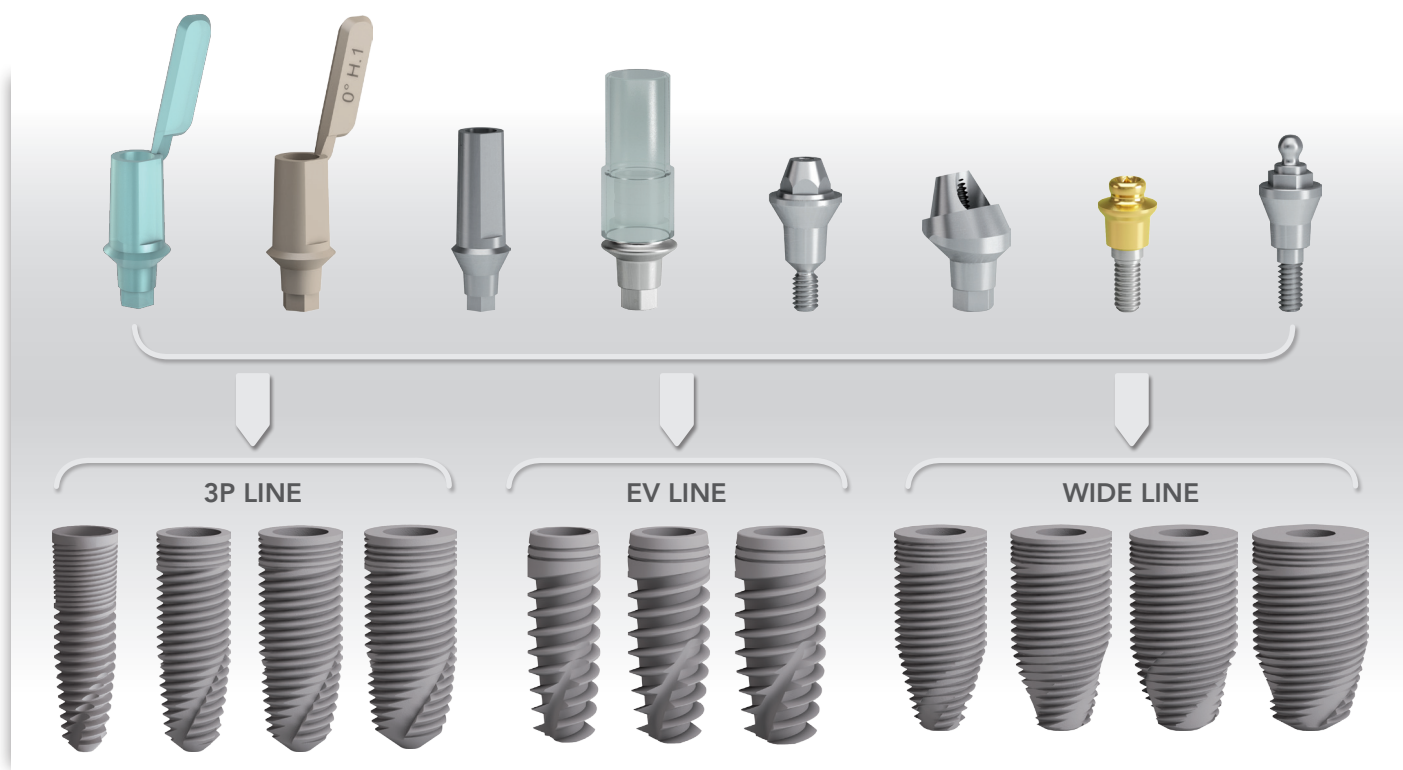


解锁系统

使用“基台抽出器”（Ref. INN-6060）分离种植体和基台之间来源于莫氏锥度的冷焊接力。

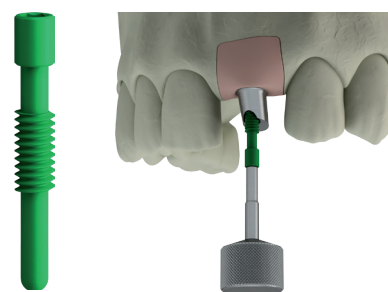

简单的种植工具箱

一个工具箱可以满足EV 3P SLIM 三个不同系统的植入，其中还含有骨挤压，止停器等，简化医生操作的工具。

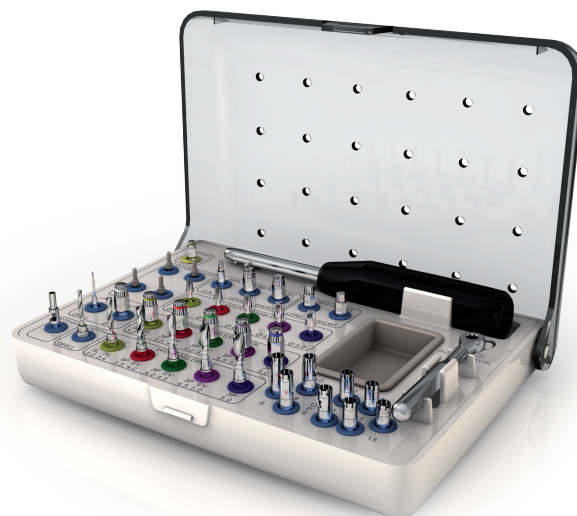



B&B DENTAL
implant company

Via San Benedetto, 1837 - 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75 - Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it - www.bebdental.it



总代理：北京莱顿医疗器械有限责任公司
地址：北京市海淀区德胜门西大街15号远洋风景8号楼2-1101
邮编：100082 电话：010-82292929



B&B DENTAL
implant company



公司简介

B&B牙科公司在意大利牙科种植体和骨再生材料等生物医学领域处于领先地位。


1992年，B&B公司于意大利东北部的博洛尼亚注册成立，这一地区是欧洲最发达的地区之一，拥有意大利最高的生活指数及享誉世界的工业产业。法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、杜卡迪等知名品牌都发源于此。这里还拥有世界上最古老的大学——博洛尼亚大学。

经过20多年的不断研究发展，不断地创新，为医生提供了更加广泛的选择，并使操作更加简单、便捷。

B&B公司的创始人 Claudio Banzi 迄今已为患者植入超过20000颗种植体，并到世界各地举行了数百场培训，同时推广他的企业理念：诚信、知识共享和创新。


B & B牙科的产品来源于专业牙医设计，并由经验丰富的工程师的提供支持。创新是我们的灵魂，我们的产品和技术在不断发展和改进，以更好地满足客户的需求，并确保每一个患者的微笑得以恢复。

先进的工厂，全球的技术培训组织，超过60个国家的供货及客服机构，共同肩负起了B&B公司的全球销售网络，并实现产品的进一步提升。

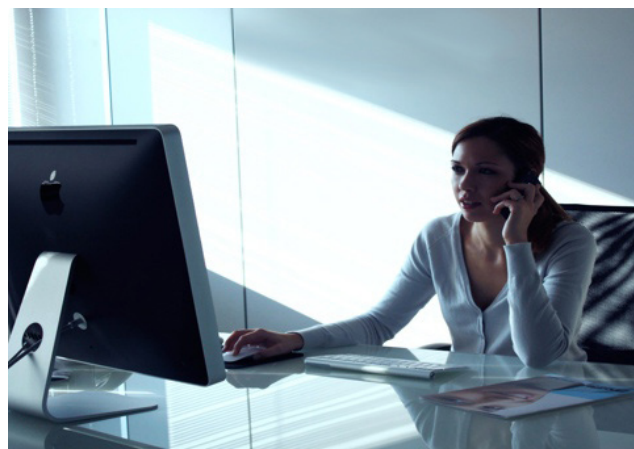

DURAVIT EV 种植体


EV种植体：直径3.5–5.0适用于松质骨、即刻种植、骨宽度不足和即刻负重。其特殊的结构提供了更加优越的初期稳定性。使植入过程更加可控，允许植入过程中更改方向。

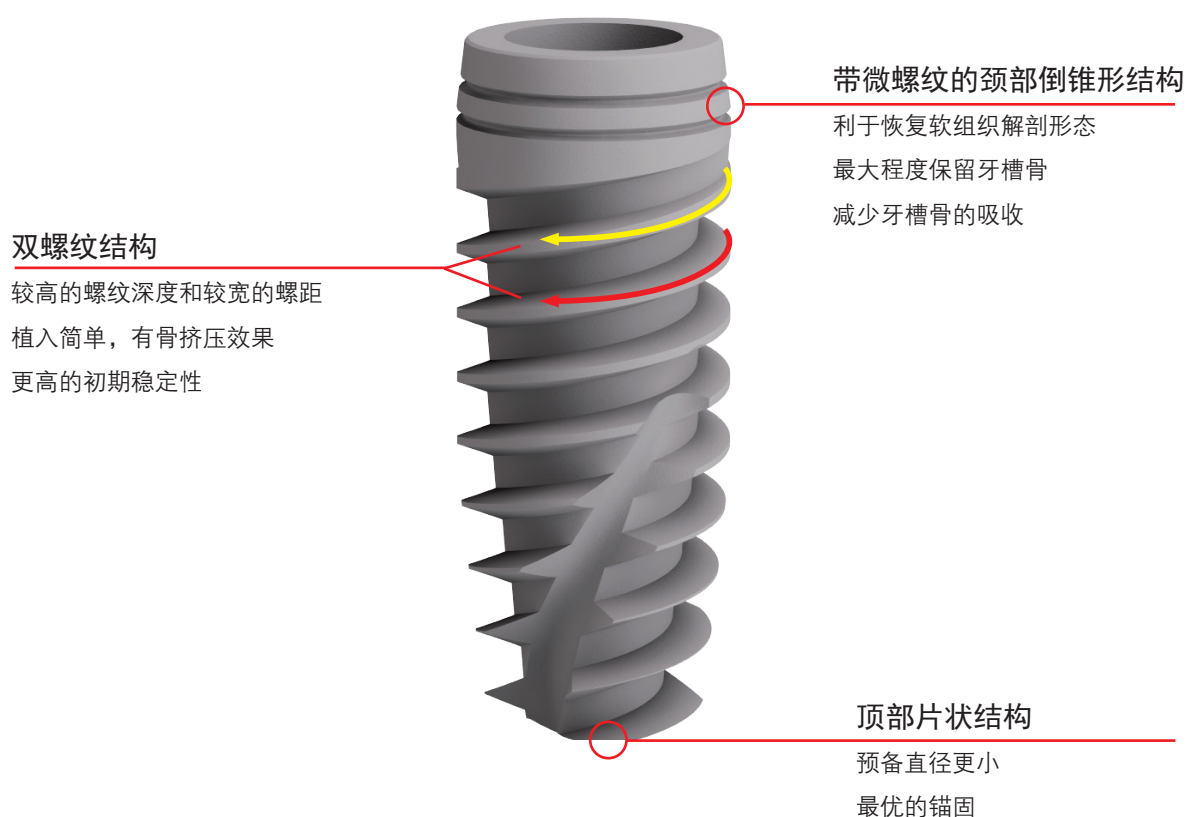

共同特点

表面处理

BioActive–独特的双酸处理工艺–纳米级的种植体表面处理诱导骨形成。更短的骨形成时间，更强的种植体骨结合力确保了种植体的长期稳定效果。

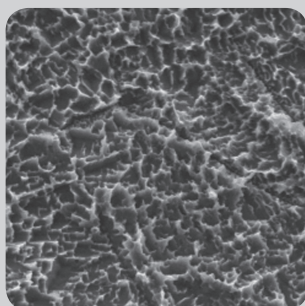


自攻系统

3P系统顶部三个自攻槽设计成一个特殊的斜面来促进植入过程中的攻丝，同时减少挤压的创伤。




DURAVIT 3P 种植体

3P种植体：直径3.5–5.0适用于所有外科手术和骨质情况。可以较快的植入并提供较高的初期稳定性。

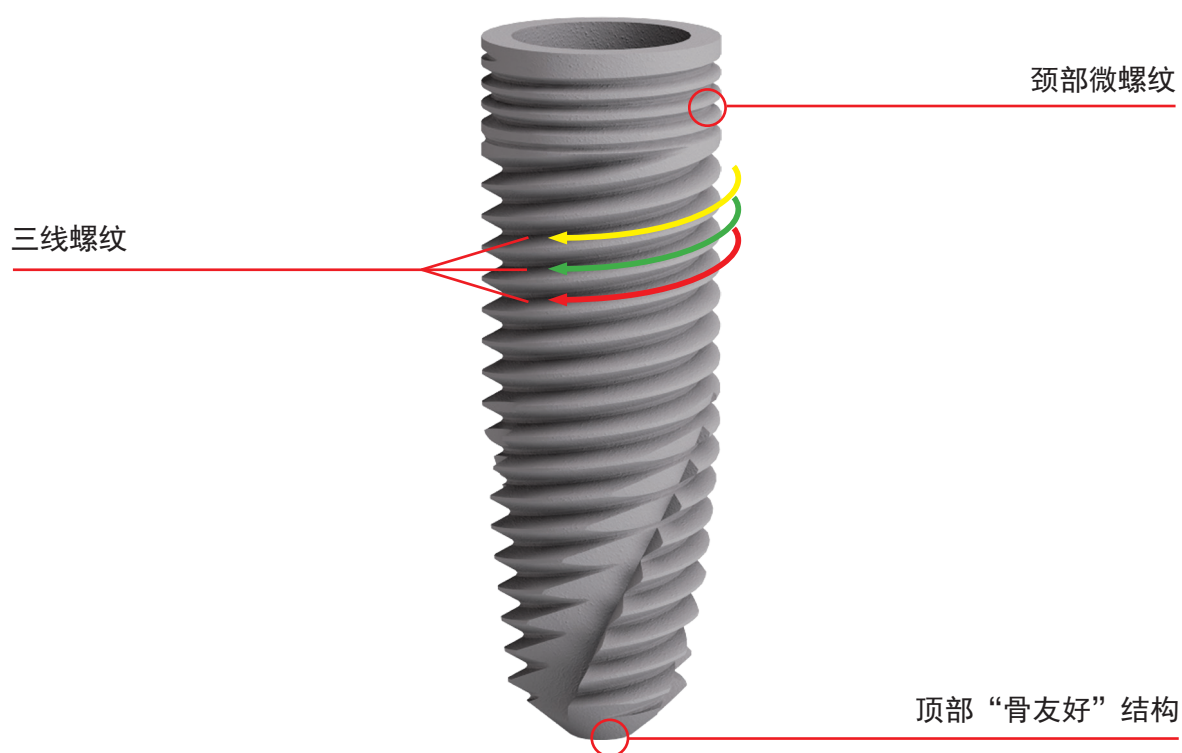

莫氏锥度连接


- 冷焊接
- 消除微动
- 消除中央螺丝断裂可能

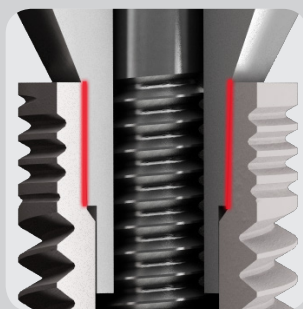

内六角连接


抗旋转
安全

- 莫氏锥度连接
- 抗扭力旋转

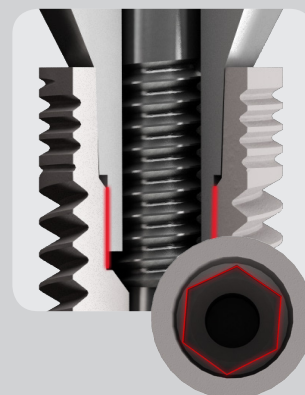

DURAVIT WIDE 种植体

WIDE 种植体：直径5.5–7.0适用于更加宽的骨量、磨牙拔除后的即刻种植。可以减少骨的流失，减少植骨的必要。

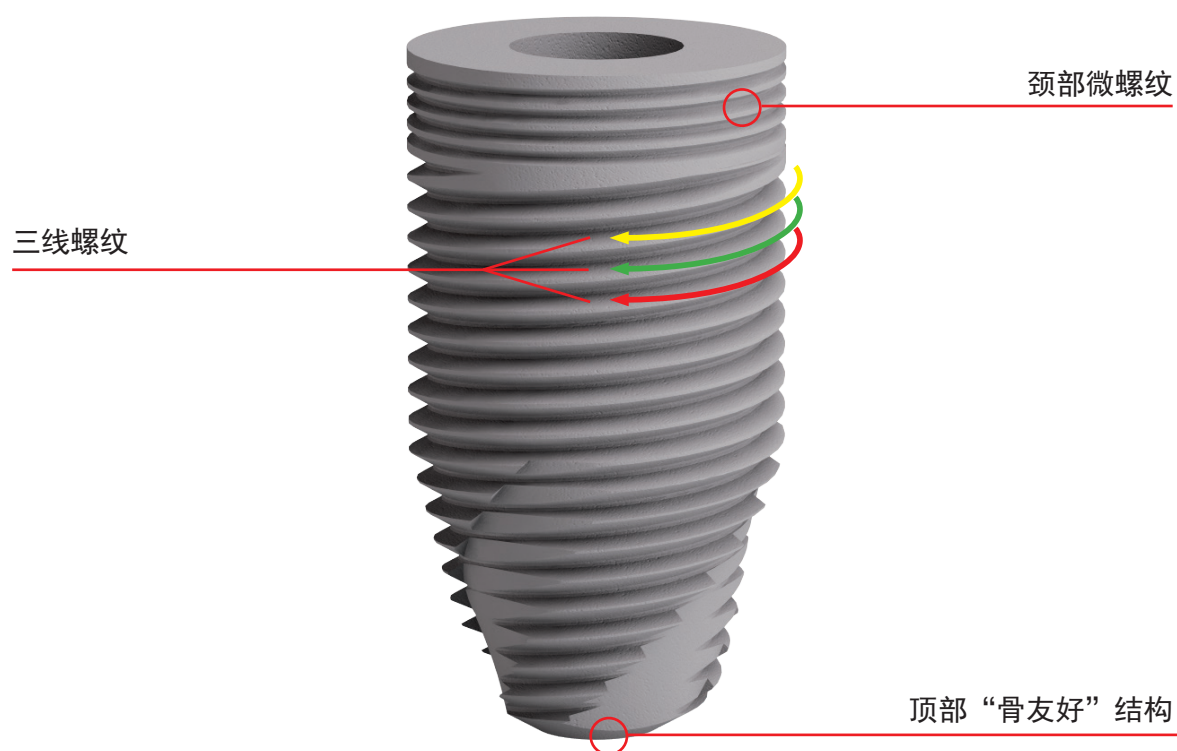


平台转移

- 减少骨吸收
- 长期美观效果稳定
- 完美的牙龈形态
- 减少细菌定植
- 减少后期牙槽嵴的吸收




根形设计

种植体根形结构

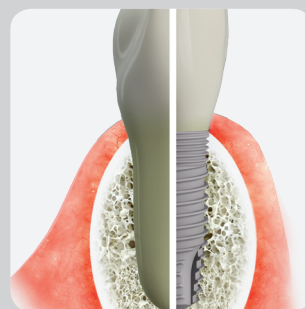

DURAVIT SLIM 种植体

SLIM 种植体：专为美学区设计，适用于下切牙单牙缺失，上侧切牙发育不全。

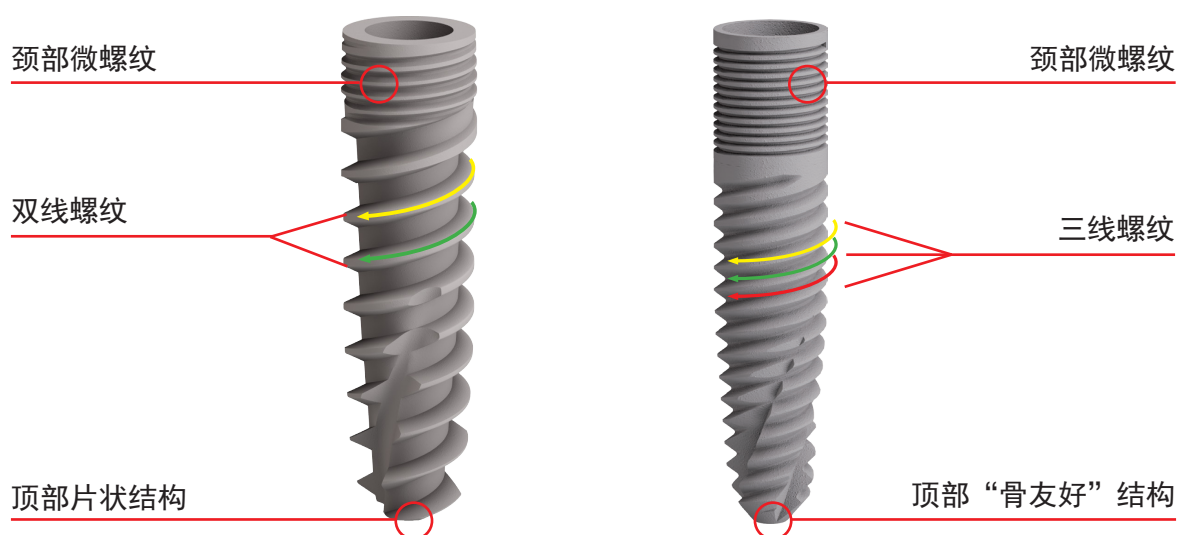

MINI DURAVIT 种植体

MINI种植体：适用于传统种植后的愈合期的临时修复、全口覆盖义齿修复。

